

# NÁVOD K OBSLUZE

kosmetický přístroj na ošetření pleti  
model BR-1200

## FRAXLIFT



## OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	3
UPOZORNĚNÍ	3
OBSAH BALENÍ	3
KONTRAINDIKACE	4
HLAVNÍ VÝHODY	4
CO MŮŽETE OČEKÁVAT	4
TECHNICKÉ PARAMETRY	4
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	5
POPIS PŘÍSTROJE	6
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	8
MOŽNÉ OBLASTI OŠETŘENÍ	9
ZPŮSOBY OŠETŘENÍ PLETI	10
MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	15
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	16
NABÍJENÍ BATERIE	17
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	17
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ	18
CERTIFIKACE	18
DOVOZCE	18

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: rma@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax Fraxlift je kosmetický přístroj nové generace. Luxusní, neinvazivní ošetření s omlazujícím efektem pro nejnáročnější klienty. Fraxlift pracuje s technologií FMR (Fractional Multipolar Radiofrequency). Pokročilá frakční multipolární radiofrekvence. Neuvěřitelně efektivní, moderní a zároveň komfortní způsob ošetření pleti, který tu ještě nebyl! Všechny použité technologie jsou neinvazivní a bezbolestné. Přístroj slouží výhradně pro estetické účely. V žádném případě neslouží přístroj pro léčbu jakýchkoliv kožních defektů. Nejedná se o zdravotnický prostředek.

## UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití poté konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli.
- Pokud přístroj upadl na zem, poškodil se a nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě kontaktujte prodejce.
- Jakmile dokončíte nabíjení přístroje, vytáhněte adaptér ze sítě 220V.
- Distributor neručí za škody, které způsobilo nesprávné používání. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



## OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj FRAXLIFT.
- Napájecí adaptér.
- Dobíjecí stojánek.
- Návod k obsluze.

## KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, které trpí některým z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



## HLAVNÍ VÝHODY

- rychlá, neinvazivní, bezzátěžová aplikace
- určená pro všechny typy pleti (pro ženy i muže)
- bez nežádoucích trvalých změn pigmentace pleti
- ihned po proceduře lze použít kosmetické přípravky
- bez omezení pokračovat v jakýchkoliv aktivitách (např. před společenským programem)

## CO MŮŽETE OČEKÁVAT

- eliminace hlubokých i jemných vrásek
- zmenšení póru
- vyrovnání jizviček
- náprava vzhledu v důsledku akné
- zvýraznění charakteristických kontur obličeje

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- technologie FMR (frakční multipolární radiofrekvence), infračervené vyhřívání
- výkon: 5W
- provozní proud: 500mA
- na jedno nabití vydrží přístroj pracovat 3 až 4 hodiny
- dobíjení pomocí dokovacího stojánku nebo napřímo pomocí USB kabelu
- rozměry: 16x4x4cm
- hmotnost: 150g

# **PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE**

BeautyRelax FRAXLIFT je certifikovaný revoluční nástroj, kterým budete v pohodlí svého domova pečovat o bližej jako v beauty studiu! Díky kombinaci několika technologií získáte silný nástroj v boji proti vráskám, povislé pokožky a tmavým kruhům pod očima. Za ošetření v salonech zaplatíte desetitisíce. Nyní si za zlomek ceny pořídíte technologie používané profesionály!

## **1. FMR Fractional Multipolar Radiofrequency**

BeautyRelax Fraxlift má unikátní rozmístění 144 elektrod na aplikační hlavici. Aplikátor ve vybraných lokalitách dodá do podkožní vrstvy radiofrekvenční energii s optimálně zvoleným výkonem a vhodnou intenzitou „shotů“ (časová charakteristika mezi pulzem a prodlevou). Elektrické pole, které vytváří 144 elektrod, je schopné se změnit během sekundy až 86100000 krát. Přenos energie je zprostředkován sadou elektrod, uspořádaných do maticové sestavy. Průměrná délka ošetření se odvíjí v závislosti na velikosti ošetřované plochy. Samotné ošetření je naprosto snadné a intuitivní. Probíhá formou „razítkování“ obličeje. Díky tomu můžete ošetřit kompletně celou oblast obličeje bez vynechání volných mezer.




## **2. Infračervené teplo**

Přenos tepla do pokožky je pro úspěšné fungování FMR technologie základ. Nejedná se však o přenos tepla od zdroje, který je již zahřátý. K zahřátí by došlo pouze na povrchu. Jsou to právě infračervené paprsky s vlnovým rozsahem 4 až 14 mikronů, které jsou schopny proniknout přes vrchní část pokožky do oblasti dermis. Hlavní význam působení infračerveného tepla spočívá v podpoření krevního oběhu, zlepšení vitality buněk a celkové látkové výměně lymfatického systému obličeje. Při teplotě kolem 45 až 60 stupňů se navíc téměř ihned nastartuje proces regenerace kolagenních a elastických vláken. Lokální výživa tkání na buněčné úrovni je násobně zvýšena.


## **POPIS PŘÍSTROJE**

čelní strana

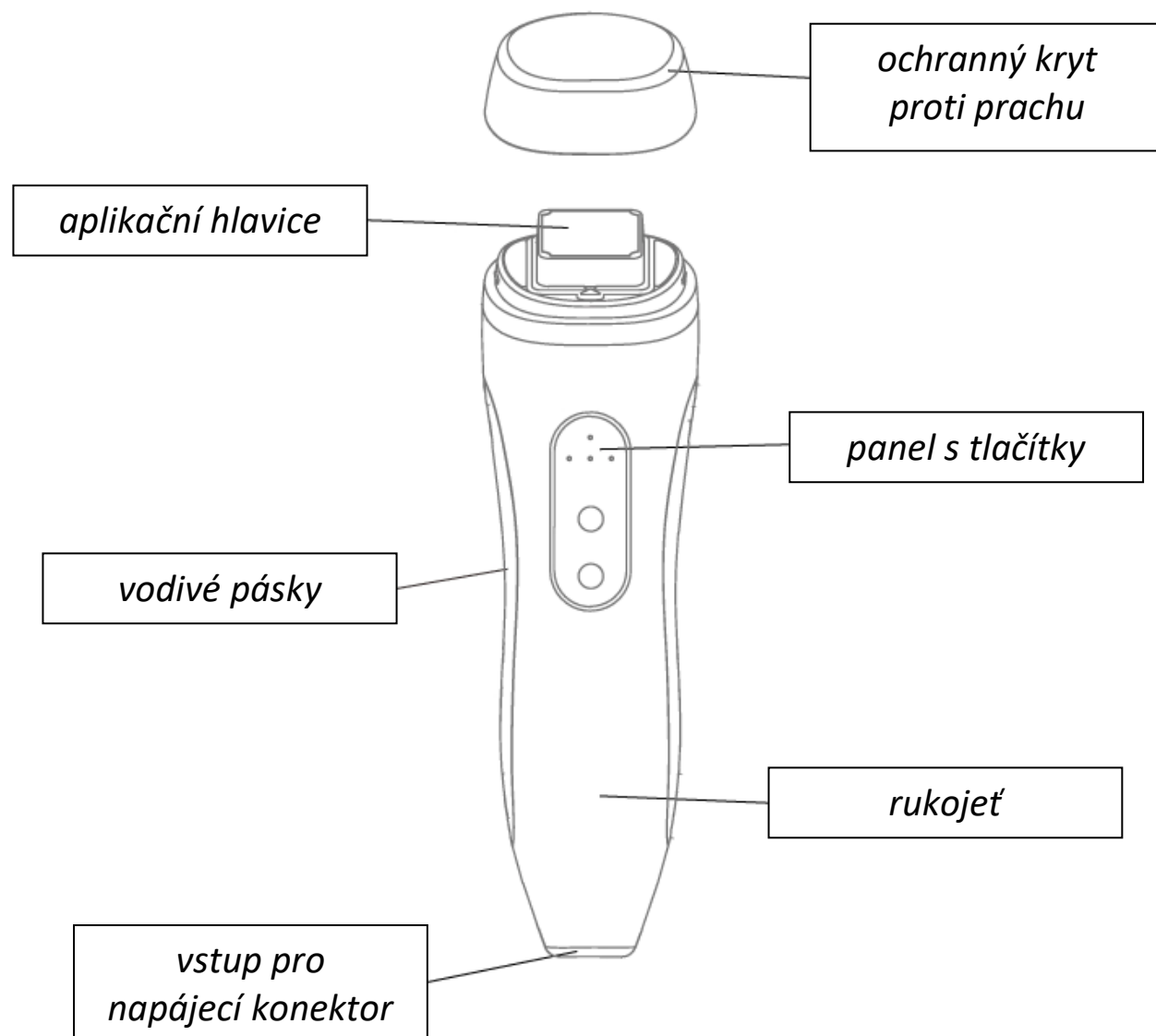


## POPIS PŘÍSTROJE

### aplikační hlavice

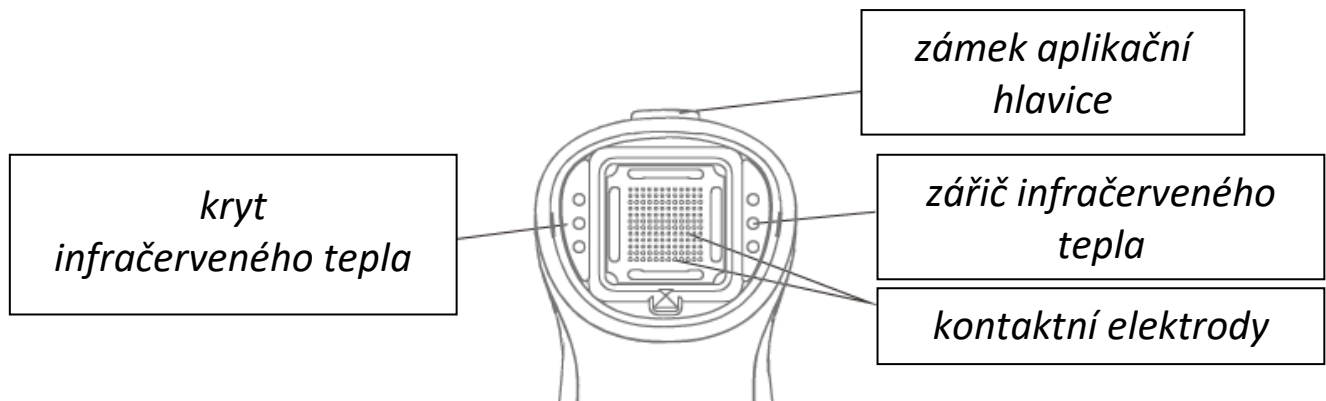

### ovládací panel

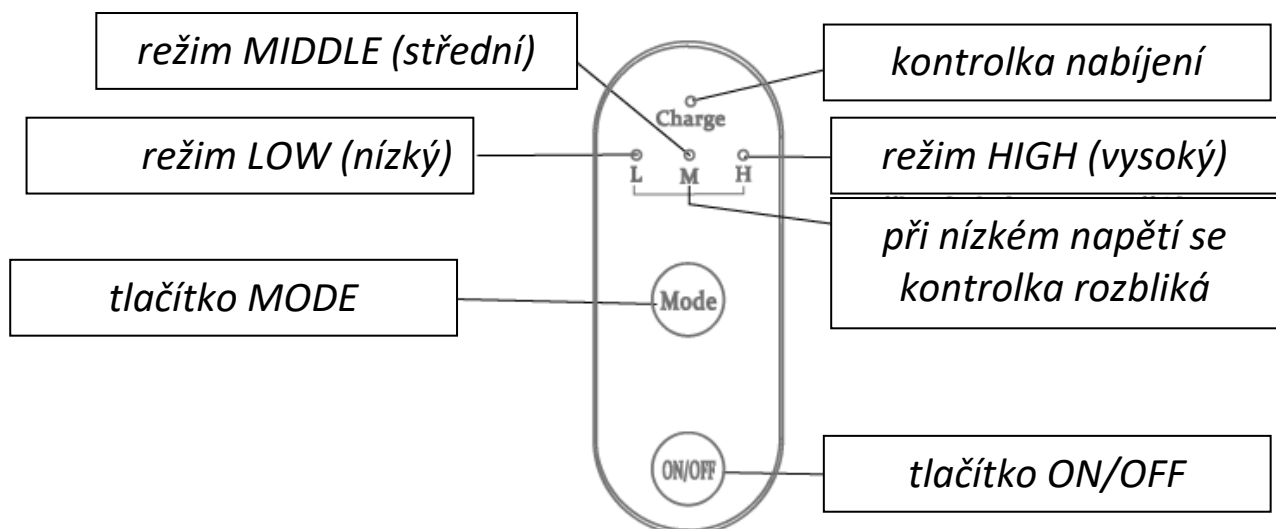

## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Před každým použitím je třeba důkladně očistit pokožku. Ideální je načasovat si ošetření po koupeli.
2. Na ošetřovanou partii naneste jemnou vrstvu čirého aplikačního gelu (není součástí balení). Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikační hlavicí a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavicí. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Přístroj bez pojivé látky mezi pletí a aplikátorem nedoporučujeme. Zbytečně by došlo ke snížení účinnosti.
3. Stiskněte krátce tlačítko ON/OFF. Přístroj se ocitne v pohotovostním režimu. Rozsvítí se zelená kontrolka u módu L (LOW). Nyní je přístroj připraven k používání.
4. Přístroj uchopte tak, aby byl váš palec v kontaktu s jednou boční kovovou plochou a zbytek prstů v kontaktu s druhou boční kovovou plochou.
5. Přístroj automaticky spustí multipolární radiofrekvenci a infračervené teplo, jakmile se dostane aplikační hlavička do kontaktu s pokožkou (a zároveň je splněna podmínka bodu 4).
6. Během ošetření můžete kdykoliv přepínat mezi intenzitou (sílu) multipolární radiofrekvence. K dispozici jsou 3 režimy:  
(**L** – LOW – NÍZKÝ, **M** – MIDDLE – STŘEDNÍ, **H** – HIGH – VYSOKÝ)  
Během ošetření bude přístroj vibrovat. 1x při režimu L, 2x při režimu M, 3x při režimu H.
7. Nyní můžete ošetřit pleť dle instrukcí uvedených v tomto návodu.
8. Pro vypnutí přístroje stiskněte krátce tlačítko ON/OFF.

**Poznámka:** Každý režim má časovač, který přístroj automaticky vypne po 15 minutách provozu.

**Upozornění:** Při prvním kontaktu s pletí mějte vždy zapnutou nízkou úroveň (L). Aplikátor přiložte na tu část obličeje, kde je více podkožního tuku. Na síle můžete postupně přidávat. Vždy však záleží na vašem subjektivním pocitu. Pokud je již ošetření nepříjemné až mírně bolestivé, nastavte zpět nejnižší úroveň (L) nebo ošetření ukončete.


**Info:** Pokud začne blikat kontrolka CHARGE, přístroj vypněte a připojte k napájecímu kabelu. Přístroj můžete nabíjet přes dobíjecí stojánek, který připojíte ke kabelu. Nebo můžete kabel zapojit přímo do přístroje. Během nabíjení svítí kontrolka CHARGE červeně.

**Tip:** Ošetřená partie obličeje a krku by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavičky po pokožce. Multipolární radiofrekvence bude mít lepší možnost proniknout do podkožní tkáně.

**Doporučení:** Ošetřenou pleť nevystavujte v délce minimálně 3 dnů příliš horké vodě. Pokožka prochází po ošetření rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně podráždit. Při používání přístroje se pleť zahřívá. Pokud vám bude pocitově přílišné teplo, udělejte si pauzu a nechte pleť vychladnout.



## **MOŽNÉ OBLASTI OŠETŘENÍ**

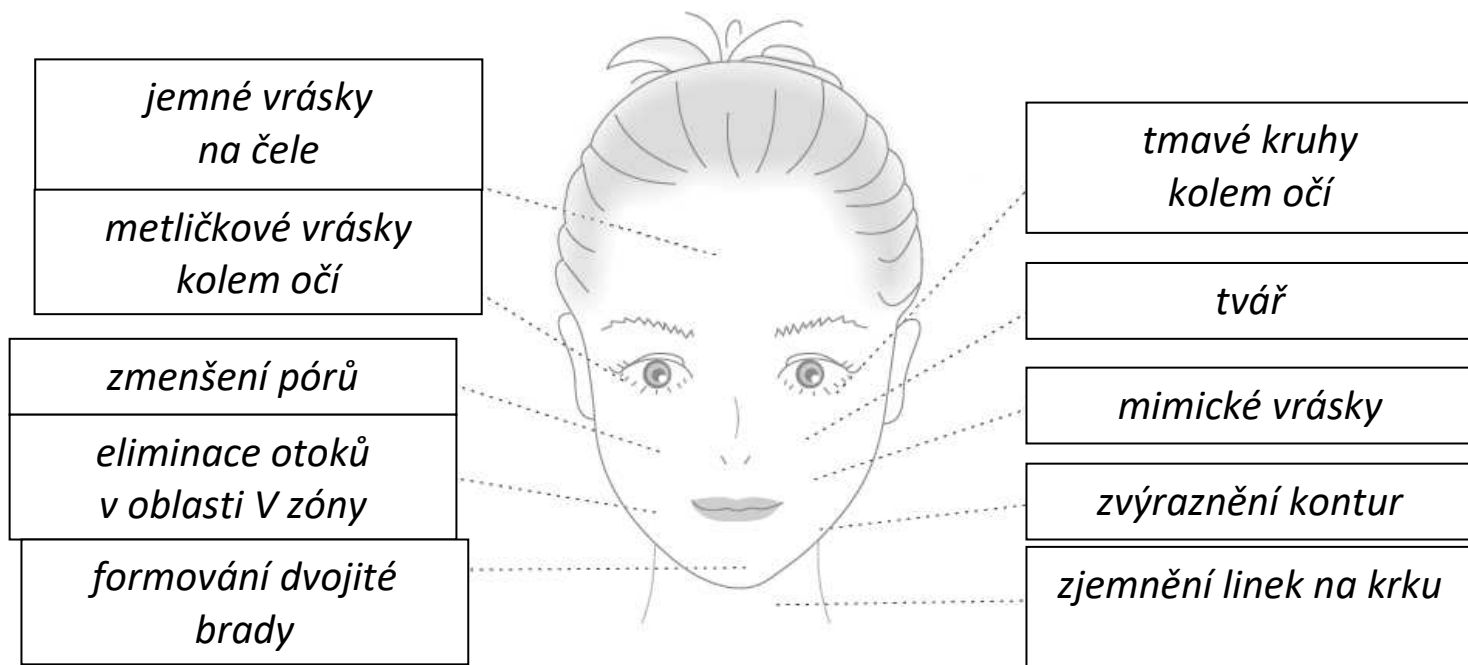

## ZPŮSOBY OŠETŘENÍ PLETI


### 1. Rychlé ošetření pleti

*Rychlé ošetření drobných vrásek, jizviček, barevných nesrovnalostí pokožky.*

Přiložte aplikační hlavici k pokožce. Na jednom místě zůstaňte tak dlouho, dokud je vám to pocitově ještě příjemné. Jakmile nastane pocit již mírně nesnesitelný, aplikační hlavici odstraňte. Tento způsob ošetření, tzv. „razítkováním“ použijte i na další části obličeje, na které chcete přístroj aplikovat.

**Doporučení:** Vyhněte se plochy kolem očí a míst, kde se nachází tenká a velmi citlivá pokožka. Vždy zvolte na přístroji režim LOW (nízká intenzita).

aplikační hlavici přikládejte postupně metodou „razítkováním“ kousek po kousku

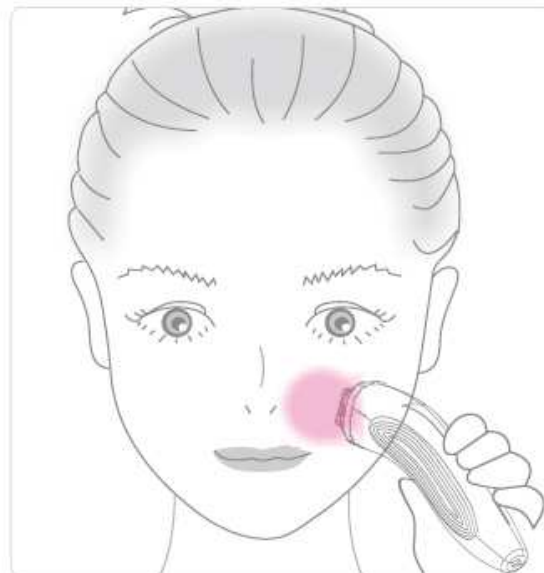

### 2. Hlubková penetrace

*FRAXLIFT můžete snadno kombinovat s vašimi oblíbenými krémy či séry, které obsahují výživové látky, vitamíny a důležité složky hydratace.*

Naneste na pleť tenkou vrstvu krému nebo hydratačního séra. Pohybujte s aplikační hlavici podél textury pokožky sem a tam. Během pohybu udržujte aplikátor ve stálém kontaktu s pokožkou s přiměřenou silou.

**Poznámka:** Přístroj FRAXLIFT je schopen díky maticovému rozložení elektrod na aplikátoru maximálně zvýšit efektivitu vstřebávání krémů hluboko do pokožky.

krém a hydratační séra usnadní „klouzání“ aplikátoru po pokožce



### 3. Běžná technika ošetření pleti

#### Významné podpoření lymfatického systému obličeje

*Během ošetření přístroje pleti dojde k probuzení a nastartování lymfy. Zlepší se detoxikace, což výrazně přispívá k eliminaci otoků (nahromaděné tekutiny v tkáních).*


Při pohybu aplikační hlavičky po pokožce ve spodní části obličeje (viz. obrázky níže). Pohybujte se nejprve krouživými pohyby. Poté dlouhým táhlým pohybem shora dolů.

**Doporučení:** Při táhlých pohybech si můžete dopomoci druhou rukou. Pokožka se díky tomu narovná. Aplikátor tak bude po pokožce klouzat mnohem snadněji.

**krouživé pohyby směrem od brady nahoru**



**dlouhé táhlé pohyby od ucha směrem dolů**

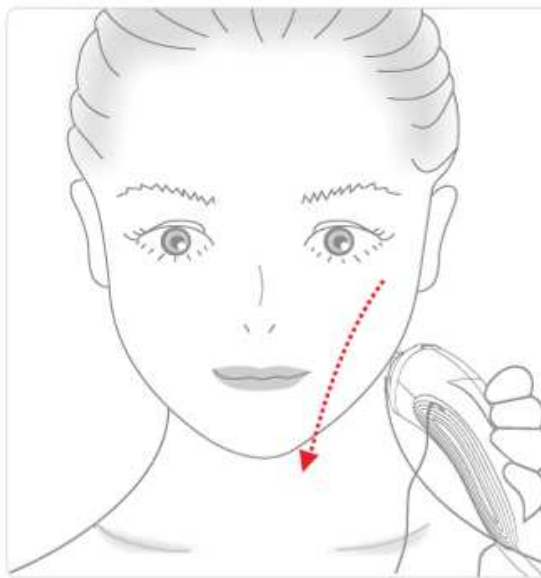


## Potlačení dvojité brady, eliminace rýh na krku

*Pomocí špičkové technologie FMR (frakční multipolární radiofrekvence) můžete zpevnit kontury tváře a potlačit efekt dvojité brady!*


Faktorů, které způsobují dvojitou bradu, je několik. Nadváha, snížená elasticita kůže, zavodnění, genetika... Přístroj FRAXLIFT napomáhá výrazně potlačit dvojitou bradu zvýšením pružnosti kůže a zlepšením lymfatického systému pro zlepšení detoxikace.

Aplikační hlavicí se pohybujte v dolních partiích obličeje. Od brady směrem k uchu a dolů přes boční stranu krku. Tento pohyb zopakujte v opačném směru. Zdola nahoru opět směrem k bradě. Aplikační hlavicí se pochopitelně můžete pohybovat po celé spodní části brady.

**dlouhé táhlé pohyby po konturách obličeje  
přes boční stranu krku dolů**

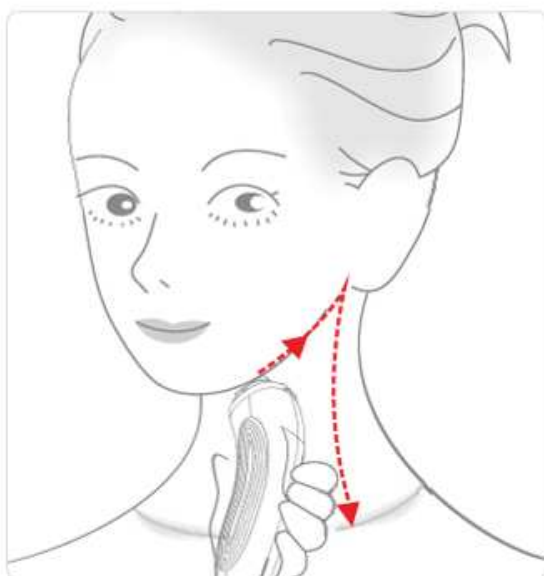

**dlouhé táhlé pohyby přes dolní partie obličeje  
směrem zdola nahoru**

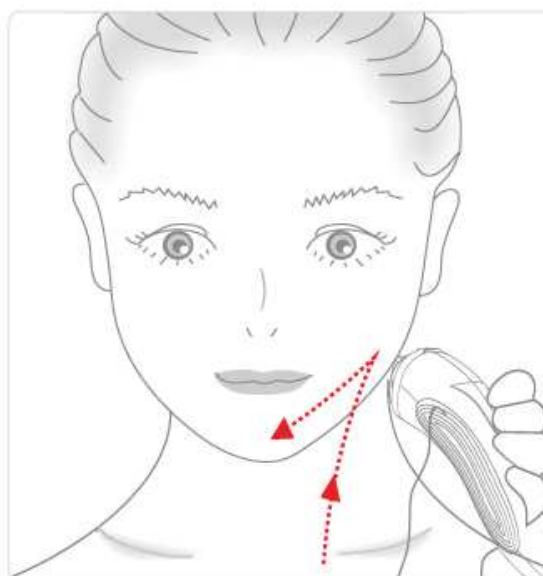


## Modelování V zóny obličeje

Aplikační hlavice přístroje FRAXLIFT má ideální rozměry pro ošetření V zóny obličeje. Velikost je optimalizovaná tak, aby s ní bylo možné provádět jako krátké krouživé, tak i dlouhé táhlé pohyby.



V zóna je označení spodní části obličeje. Při jejím vykreslení připomíná písmeno V. Zejména v této oblasti je důležité, aby byla elasticita na co nejvyšší možné úrovni. Opticky odděluje hlavu od krku. Proto zvýšení její pružnosti eliminuje efekt druhé brady.

**Ve spodní části tváře se pohybujte krátkými krouživými pohyby od koutku úst směrem nahoru k uším. Poté přejděte dlouhým táhlým pohybem přes boční stranu krku zpět směrem ke koutkům úst. Tento okruh zopakujte několikrát za sebou.**

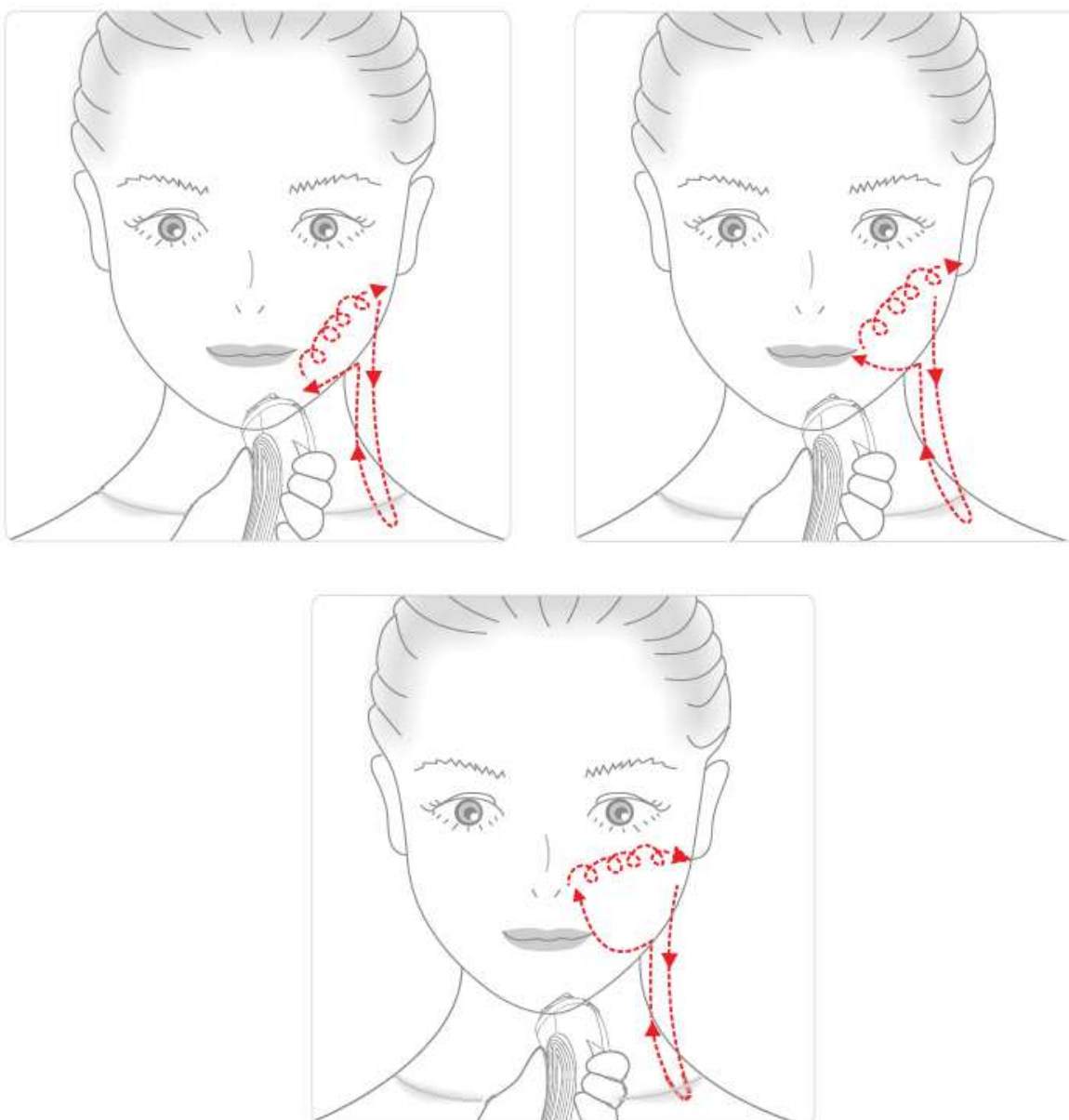

## Eliminace jemných metličkových vrásek

Metličkové vrásky úzce souvisí s věkem. Postupem času jak stárneme, dochází ke snížení produkce kolagenu a elastinu. Sníží se pružnost pokožky, což vede ke vzniku větších či menších vrásek.

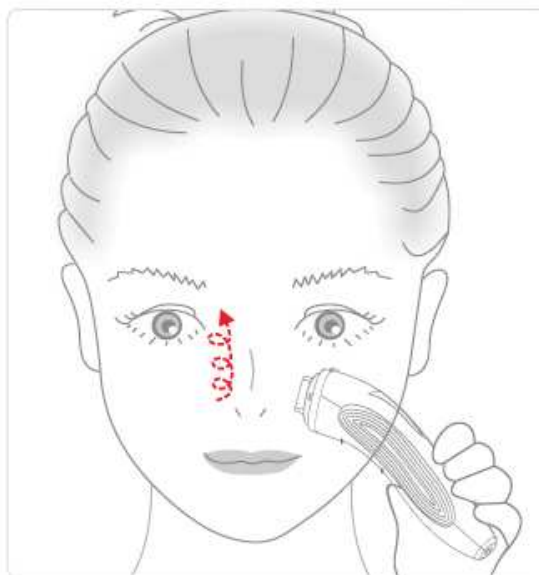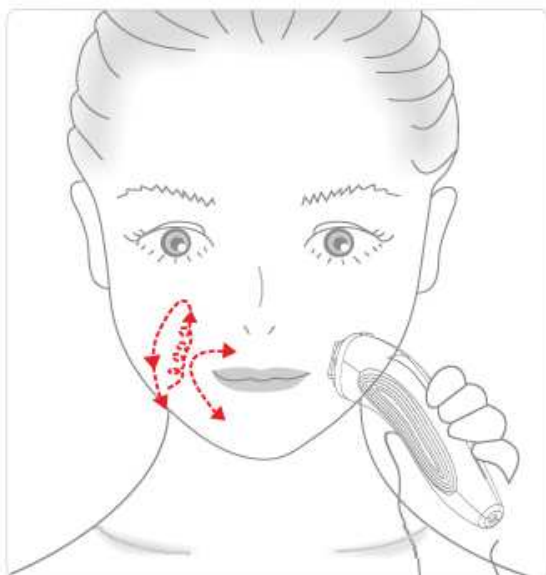


## Vyhlazení vějířových vrásek kolem očí

Jednou ze silných stránek přístroje FRAXLIFT je ošetření oblasti kolem očí.

Výkon multipolární frakční radiofrekvence je natolik silný, aby stimuloval tvorbu elastických a kolagenních vláken. Na straně druhé dostatečně jemný, aby nepoškodil tenkou vrstvu pleti, která se v oblasti kolem očí nachází.

**Upozornění:** Vždy dodržujte minimální vzdálenost od oka alespoň 1 centimetr. Pokud máte pleť kolem očí velmi tenkou a citlivou, ošetření proveďte formou „razítkování“ - tzn. postupným přerušovaným přikládáním aplikátoru. V opačném případě použijte kontinuální táhlý pohyb.

Ošetřením pleti v této oblasti výrazně přispějete k vyhlazení vějířových vrásek, potlačení tmavých pytlů pod očima. Budete působit svěžím, odpočatějším dojmem.

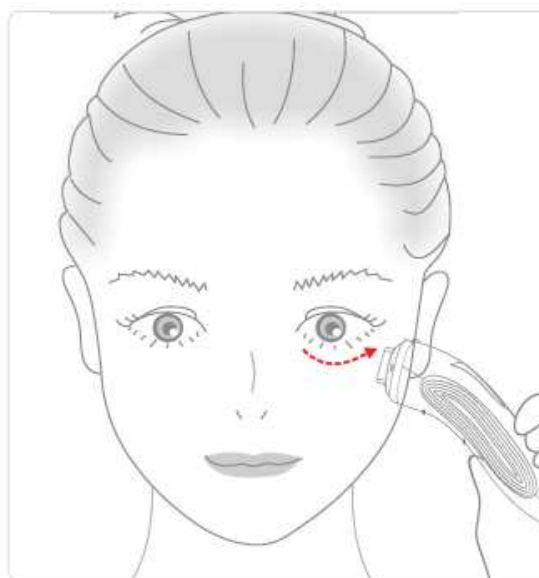



## MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



**ČELO:** pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




**NOS:** pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



**TVÁŘ:** pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



**BRADA:** pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

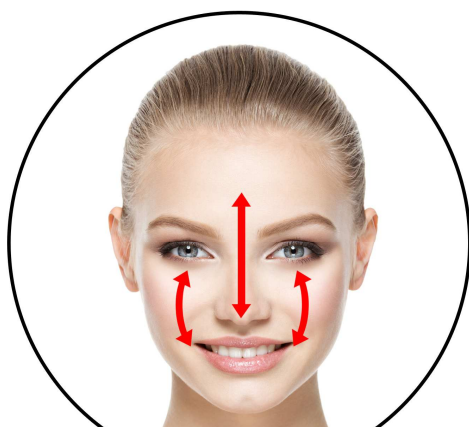

**T zóna:** pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



**Detox lymfatických cest:** pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku

## **NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI**

### **Proč je výrazný cenový rozdíl přístrojů v kosmetických salonech a přístrojích pro domácí použití?**

Hlavním důvodem je rozdílná frekvence používání. Přístroje v kosmetických salonech musí být schopné pracovat nepřetržitě od rána do večera. Tím je kladena zvýšená náročnost na použité materiály a celkovou technologickou koncepci (větší zdroje napájení, větší míra chlazení, atd.) Výkon kosmetických přístrojů pro domácí použití je navržen tak, aby uživateli splnil avizované benefity. Vyšší frekvence použití = dražší výrobní náklady.

### **Jaký je důvod čištění/dezinfekce čištění aplikační hlavice?**

Po skončení ošetření mohou na aplikační hlavici ulpět mikroskopické částičky kůže. Očištěním zabráníte jednak jejich případnému vniknutí do přístroje a zajistíte především hygienu provozu.

### **Jak často mohu přístroj používat?**

Vždy záleží na intenzitě, kterou pleť ošetřujete. Je třeba si uvědomit, že při použití vyššího výkonu potřebuje pleť určitý čas na mírnou rekonvalescenci. Přístroj pleť mírně vysušuje. Po každé aplikaci použijte nejlépe ještě hydratační krém nebo mast, aby byla pokožka stále hydratovaná.

### **Jak dlouho by mělo trvat individuální ošetření pleti?**

Doporučená délka individuálního ošetření je v rozsahu od 10 do 15 minut.

### **Existují nějaké kontraindikace? (situace, kdy nelze přístroj používat)**

Přístroj BeautyRelax FRAXLIFT je určen pro všechny typy pleti bez věkového omezení uživatele. Přístroj není vhodné používat, pokud trpí uživatel vážným kožním onemocněním. Viz. seznam kontraindikací v úvodu návodu.

### **Je přístroj zdravotnický prostředek?**

Nikoliv. Přístroj neslouží pro léčbu závažných kožních onemocnění. Přístroj NELÉČÍ: aktinickou keratózu, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitidu lupénku.

### **Jak postupovat, když baterie ztratí po delší době kapacitu?**

Pokud se postupem času kapacita baterie výrazně sníží, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: rma@santadria.cz Zašleme informace, jakým způsobem lze výměnu baterie řešit.

### **Má přístroj nějakou certifikaci?**

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: rma@santadria.cz Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

### **Kde se přístroj vyrábí?**

Přístroj si necháváme vyrábět v Číně dle našich požadavků a specifikací. Garantujeme standardní záruční i pozáruční servis.

### **Může přístroj používat více osob?**

Primárně to nedoporučujeme. Pakliže se však jedná o rodinné příslušníky a je po každém ošetření dodržen proces čištění a dezinfekce aplikační hlavice, druhá osoba přístroj použít může.



**Jaké kosmetické přípravky kombinovat během ošetření přístrojem FRAXLIFT?**

Používat můžete jakékoliv vámi oblíbené krémy a séra. Vždy však dbejte na to, aby nevnikly do přístroje.

**Jaké části těla lze přístrojem ošetřit?**

Přístroj je určen pro ošetření oblasti obličeje a krku.

## **NABÍJENÍ BATERIE**

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Jakmile svítí během používání kontrolka CHARGE, je třeba přístroj nabít.

**Postup nabíjení:**

1. Vložte přístroj do dobíjecího stojánu, který je připojený k adaptéru. Nebo můžete adaptér zapojit přímo do přístroje.
2. Adaptér zapojte do sítě 220V.
3. Během nabíjení svítí kontrolka CHARGE červeně. Jakmile je plně nabita, kontrolka svítí zeleně.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout dovnitř přístroje. Před čištěním je vhodné aplikační hlavici z přístroje vyjmout. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě hlavice žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození elektronického obvodu jednotlivých pinů.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [rma@santadria.cz](mailto:rma@santadria.cz)

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.